



# ユーシン トレイキット 精密尿量計付 標準Gタイプ (トレイ型完全閉鎖式導尿キット)

**ラテックスフリー**



### ◆業務の効率化

カテーテル留置に必要な消耗品・器具が無菌状態でセットされており、速やかに手技が行えます。


### ◆ラテックスフリー

生体に優しいオールシリコンフォーリーカテーテルをはじめ、留置に必要な物品すべてがラテックスフリーですので、安心してご使用頂けます。

### ◆尿路感染防止

完全閉鎖式の採用により、細菌の侵入を防止し、尿路感染防止に有効です。

特定保険医療材料請求名  
039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2)2管一般(Ⅱ)②閉鎖式導尿システム

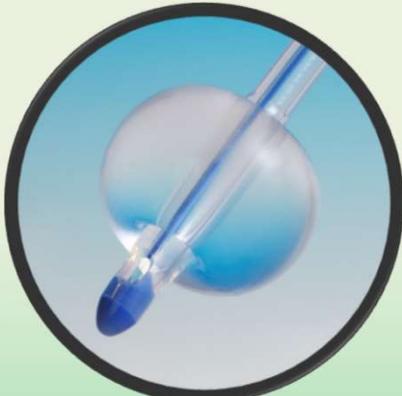

本製品のバルーンカテーテルサイズは12~20Frで、バルーン容量は全サイズ最大容量10mlとなっております。又、カテーテル単品のご用意もございます。

- ◆手袋・・・1組  
ニトリル製ですのでラテックスアレルギーの心配がありません。又、**パウダーフリー**となっております。
- ◆綿球・・・3個  
綿の毛羽立ちが少ない日本製の物を採用。
- ◆ガーゼ・・・2枚  
200mm×280mmと十分な大きさです。
- ◆シーツ(包み用、処置用)・・・各1枚  
緑面が撥水仕様、白面が吸水仕様となっております。
- ◆固定用テープ・・・2枚  
カテーテル固定にご使用下さい。
- ◆ピンセット・・・1本  
先端に角度を付け、綿球の保持力を高めました。
- ◆滅菌精製水入りバルーン拡張器・・・1本  
滅菌済みの精製水が10ml充填されています。
- ◆潤滑ゼリー・・・1袋  
水溶性潤滑剤で、5g入りです。
- ◆消毒液・・・1袋  
ポビドンヨード消毒液10%が、15ml入りです。
- ◆トレイ・・・1個  
任意の部分に消毒液等を入れて、ご使用下さい。



※受注生産

●X線造影ライン入り EOG滅菌済

**再使用禁止**

製品番号	サイズ(外径mm)	バルーン最大容量	カラーコード	全長	箱入数	ケース入数	JANコード
TCG1002-12	12Fr(4.0)	10ml	白	400mm	5セット/箱	4箱/ケース	4580292406453
TCG1002-14	14Fr(4.7)		緑				4580292406460
TCG1002-16	16Fr(5.3)		橙				4580292406477
※TCG1002-18	18Fr(6.0)		赤				4580292406484
※TCG1002-20	20Fr(6.7)		黄				4580292406491



オールシリコンフォーリー  
バルーンカテーテル

- 滑らかで、柔軟性に優れています。
- 生体適合性に優れた材質です。
- 未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、安心してご使用できます。



ニードルレス採尿ポート

- 採尿取口はニードルレス採尿ポートを採用。
- 針刺し事故を防止でき、針不要のため、コスト軽減にもつながります。
- ポート洗浄は容易にできます。



カテーテル採尿バッグ接続部

- カテーテルと採尿バッグの接続部はシールされており、細菌の侵入を防止できます。



導尿チューブ

- 太く折れ曲がりにくいチューブです。
- チューブ内のリブ加工(ライン入り)により、採尿バッグ内の空気抵抗を軽減。又、キンクしても尿が流れる構造になっております。




排尿コック

- 片手操作により、簡単な開閉が可能です。
- 排尿口先端は、斜めカットを入れたプラスチック製の為、尿飛散が低減されます。



精密尿量計付 採尿バッグ  
(400ml+2600ml)

- 多量の時間尿にも、余裕を持って対応できます。

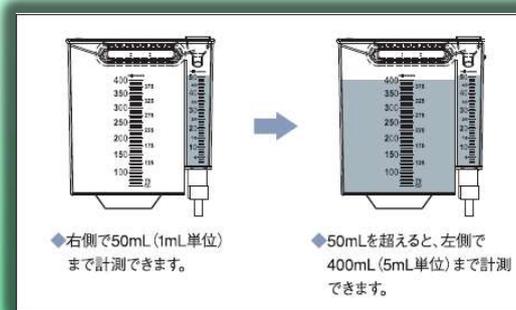

精密尿量計 400ml

- 右側で2~50mlまで計測ができ、目盛は1mlきざみとなります。
- 右側の50mlの計測を超えると、液体は左側へ流れ落ち、さらに400mlまで計測ができます。60~400mlは5mlきざみとなります。

総販売元

株式会社 ユーシンメディカル  
〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3  
TEL 03-5844-1415  
FAX 03-3815-5782  
URL <http://www.yushinmed.co.jp>

販売業者