
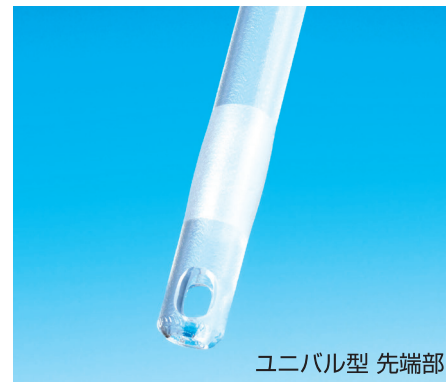


ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型・標準型

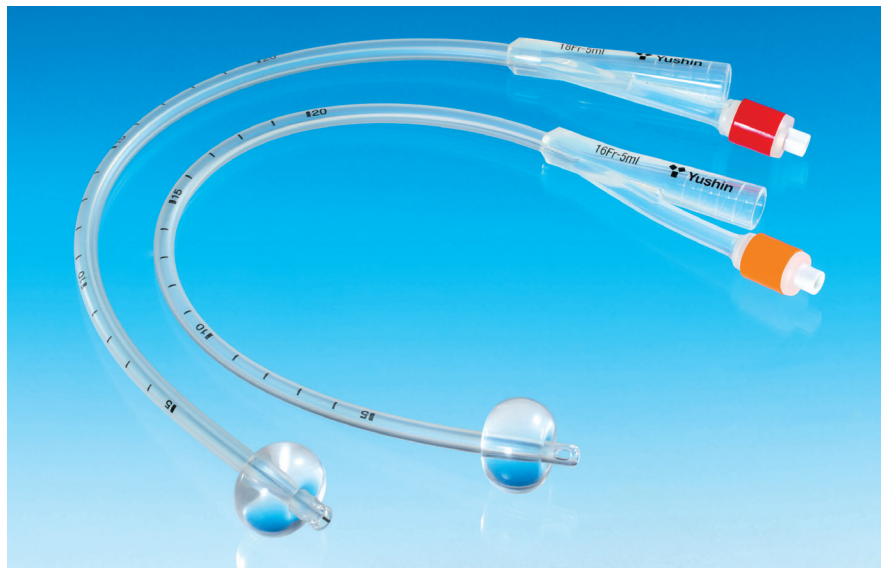

ユニバル型 先端部

ユニバル型とは…

弊社独自の製造技術によりバルーン部とカテーテル部の段差を少なくした製品です。

日本〈特許第3672191号〉
アメリカ合衆国〈特許No.6740273B2〉
韓国〈特許No.434720〉
台湾〈特許No.168733〉

- ◆ユニバル型 ユニバル型は、バルーン収縮時にカテーテル外径とバルーン部の外径差を少なくしてあるため、挿入・抜去の操作がスムーズに行え、瘻孔形成壁へ与えるダメージを軽減します。
- ◆オールシリコン製 組織への刺激が少なく、尿成分等の付着がほとんどありません。快適で効率のよい持続性排尿が期待できます。透明タイプの為、尿の状態の確認が容易です。
- ◆扁平バルーン 腎盂内にコンパクトに、確実に留置することができるように、可能な限りバルーンが扁平になるように成型してあります。
- ◆X線造影ライン ユニバル型は造影ラインにタングステン素材を使用しておりますので、従来品より造影性に優れます。デブスマーク(目盛深度)は1cm毎にマーキングされています。

特定保険医療材料請求名

腎瘻又は膀胱瘻用カテーテル及びカテーテルセット

(1)腎瘻用カテーテル ④腎盂バルーン型

ユニバル型(先端開孔 側孔2穴タイプ)

X線造影ブラックライン入り EOG滅菌済み 包装:10本/1箱

単回使用

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長	製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1021UB-12-33	12Fr	2mL	白	330mm	1021UB-12	12Fr	2mL	白	420mm
1021UB-14-33	14Fr	3mL	緑		1021UB-14	14Fr	3mL	緑	
1021UB-16-33	16Fr	5mL	橙		1021UB-16	16Fr	5mL	橙	
1021UB-18-33	18Fr		赤		1021UB-18	18Fr		赤	
1021UB-20-33	20Fr		黄		1021UB-20	20Fr		黄	
1021UB-22-33	22Fr		紫		1021UB-22	22Fr		紫	
1021UB-24-33	24Fr		青		1021UB-24	24Fr		青	

標準型(先端開孔 側孔2穴タイプ)

X線造影グリーンライン入り EOG滅菌済み 包装:10本/1箱

単回使用

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長	製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1021-08-33	8Fr	1.5mL	赤	330mm	1021-08	8Fr	1.5mL	赤	420mm
1021-10-33	10Fr		黄		1021-10	10Fr		黄	
1021-12-33	12Fr	2mL	白		1021-12	12Fr	2mL	白	

製造販売元

販売業者

 **Yushin Medical Co., Ltd.**
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
URL.http://www.yushinmed.co.jp